

機械器具 58 整形用機械器具  
 管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント JMDNコード 41059000

**T 2 1 ブラケット&キャップ**

再使用禁止

**【禁忌・禁止】\***


- (1) 再使用禁止
- (2) 含有金属に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴がある患者には、使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】\*\***

本品は、次の原材料で作られています。


《ブラケット》

PC/ポリエステルアロイ（ビスフェノールAを含む）  
 ステンレス鋼（鉄、クロム、ニッケル、マンガン）

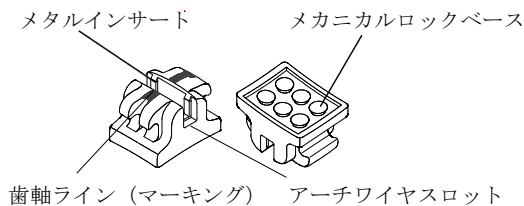

《キャップ》

ポリアセタール

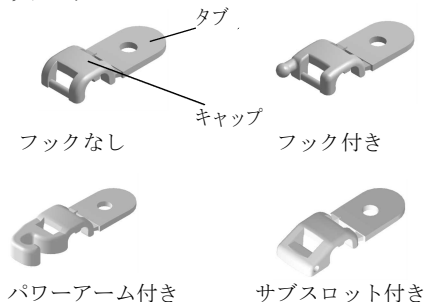

**【使用目的又は効果】\*\***

歯列矯正治療において、歯牙に直接取付けて矯正力を付与し、歯牙の捻転・移動を行うために用います。本体はメカニカルロックベースを採用しているため安定した接着強度が得られるとともに半透明なので目立たず審美性があり、キャップはアーチワイヤをアーチワイヤスロットに保持する際に使用します。

**【使用方法等】\*\***

- (1) ボンディングベース面に矯正用接着剤を塗布して、歯面に接着します。接着剤の使用法については接着剤の取扱説明書を参照してください。
- (2) アーチワイヤスロットにアーチワイヤを装着します。
- (3) キャップのタブをニードルホルダ等で把持し、先に歯肉側タイウイングに引っ掛け、次に切端側タイウイングの上から嵌めこみ、外れないようにしっかり装着してください。



また、治療に応じてこれまでの結紮線、エラストメリックリングもお使いいただけます。装着後は、キャップのタブを捻るようにしてキャップと分離してください。



キャップを交換またはワイヤを外す場合は、ブラケット本体の切端側溝に探針を挿入して、キャップを取り外してください。



〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- (1) ボンディングベース面に直接指で触れたり、油分、薬液をつけないでください。
- (2) メカニカルロックベース採用により、接着剤を選びません。症例により歯面から脱落するようなおそれが考えられる場合には、市販のプラスチックプライマをお使いください。
- (3) マーキングはキャップ装着前に除去してください。
- (4) キャップはT21ブラケット専用です。破損の原因になりますので、他のブラケットに使用しないでください。
- (5) キャップをT21ブラケットに一度嵌め込んでから外すと、変形し強度が低下しますので、再使用はしないでください。
- (6) キャップはT21ブラケット上でアーチワイヤを固定しないため、粘膜をキズつけないよう、ストップチューブなどを用いて、アーチワイヤ遠心端に抜け止めを行ってください。特に線径の細いアーチワイヤを使用する際はご注意ください。

**【使用上の注意】\*\***

1. 重要な基本的注意
  - (1) ブラケットの主成分であるポリカーボネートは、唾液などの影響により、ビスフェノールA（BPA）が微量溶出するおそれがあります。なお、厚生労働省の「内分泌攪乱化学物質の健康影響に関する検討会の報告」などによると、ポリカーボネートから溶出するレベルのBPAが人の健康に重大な影響を与えるという科学的知見は得られていません。
  - (2) 本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせてください。
  - (3) 硬いものを噛まないよう、指導をお願いします。ブラケット破損の原因となることがあります。
  - (4) 製品に欠けなどの異常が認められた場合は、使用を控え、弊社販売担当者に連絡してください。
2. 不具合・有害事象
  - (1) 一度装着、使用された製品は、変形、劣化、強度低下を招き、感染症を誘発するおそれがあります。
  - (2) 本品の使用に伴い、発疹や皮膚炎等の過敏症状が発生することがあります。

**【保管方法及び有効期間等】\***

〔保管方法〕

- (1) 埃、塩分、水分を多く含んだ空気による悪影響を生ずるおそれのない場所、及び外圧のかからない場所に保管してください。
- (2) 直射日光、高温多湿、紫外線を避けて保管してください。長期にわたる高温多湿環境は、接着強度の低下をまねく原因となります。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\***

製造販売元：トミー株式会社

TEL 042-363-1151  
<http://www.tomyinc.co.jp/>

発売元：TOMY INTERNATIONAL INC.\*

株式会社 トミー オрто デンタル  
 TEL 03-3258-2231  
<http://www.tomy-ortho.co.jp/>